

# > P o w e r A F A <

## Trattamento AFASIA

Guida rapida all'utilizzo del Software (rev. 2.3 - 29/10/2012)

<http://www.powerwolf.it/PowerAFA.htm>

- INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE INIZIALE
- ESECUZIONE DEL SOFTWARE
- ESECUZIONE DEGLI ESERCIZI
- STATISTICHE
- CONFIGURAZIONE e OPZIONI
- ALTRE FUNZIONALITA'
- AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA
- INSERIMENTO DI UN NUOVO PAZIENTE
- PERSONALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI
- SEGNALAZIONE BUG, PROPOSTE E SUGGERIMENTI
- CUSTOMIZZAZIONE DEI MENU'



Software basato sulle schede della **Mayo Clinic** ([www.mayoclinic.com](http://www.mayoclinic.com)) e sui libri “Rieducazione linguaggio” di **Robert L. Keith** (ed. **Omega** – [www.ediomega.com](http://www.ediomega.com)).

## INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE INIZIALE (torna all'indice)

Prima di utilizzare il programma è necessario eseguire la procedura di installazione e inizializzazione. Per installare il programma inserire il supporto fornito al momento dell'acquisto o, nel caso di download, cliccare sul file di installazione. Seguire la procedura guidata.

Maggiori informazioni sulla procedura di installazione possono essere lette dall'help online: [help di installazione e primo utilizzo del software](#).

Terminata l'installazione, il programma crea un'icona sul desktop e una voce nel menù programma di Windows:

**Start → Programmi → Powerwolf → PowerAFA - Gestione Afasia**




Maggiori informazioni sulla procedura di installazione possono essere lette dal seguente help online: [help di installazione e primo utilizzo del software](#).

**N.B. Il sistema di sintesi vocale di windows VISTA e 7, e successivi sistemi operativi, consente l'utilizzo di voci migliori per l'assistente animato. Il programma funziona perfettamente anche su Windows XP e Server 2003, ma la qualità della sintesi vocale è inferiore a quella presente sui sistemi operativi più recenti della Microsoft.**

Terminato il caricamento, apparirà la seguente schermata di login:




Se il prodotto non è stato mai attivato, appare la seguente schermata:

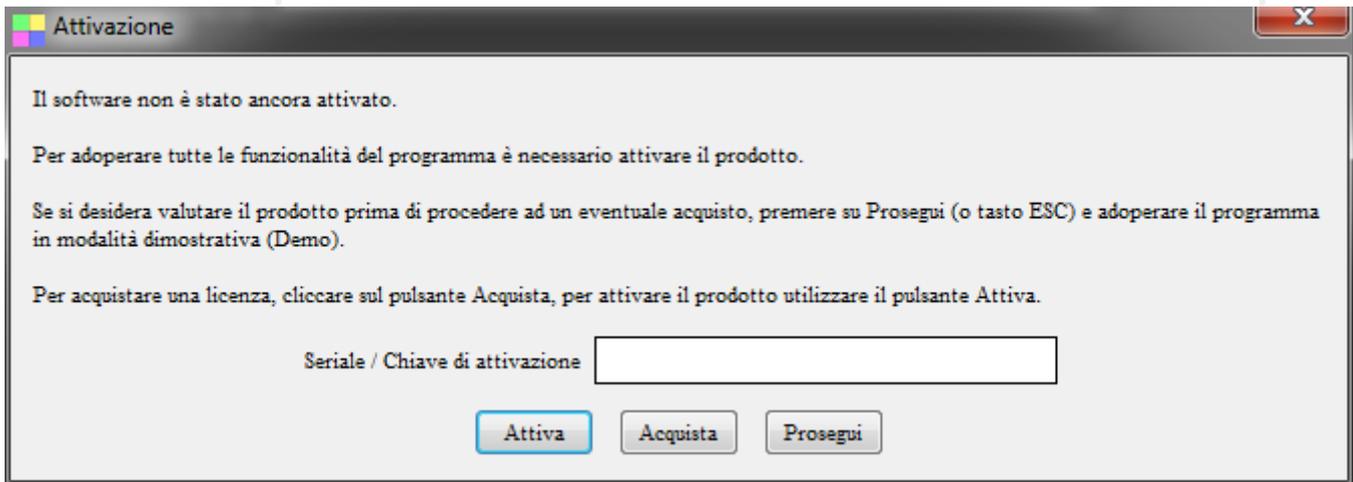

La precedente schermata è visualizzata anche quando la licenza è scaduta, oppure l'hardware (in particolare scheda madre e hard disk) del computer su cui è installato il programma è cambiato. In quest'ultimo caso è possibile ricevere una nuova licenza gratuitamente, nel primo caso è necessario rinnovare la licenza per continuare ad adoperare il programma.

Per attivare il software inserire il codice seriale o la chiave di attivazione ricevuta al momento dell'acquisto o in una successiva comunicazione (telefonica o via email) e adoperare il pulsante 'Attiva'. Seguire la procedura guidata: se l'attivazione va a buon fine verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:

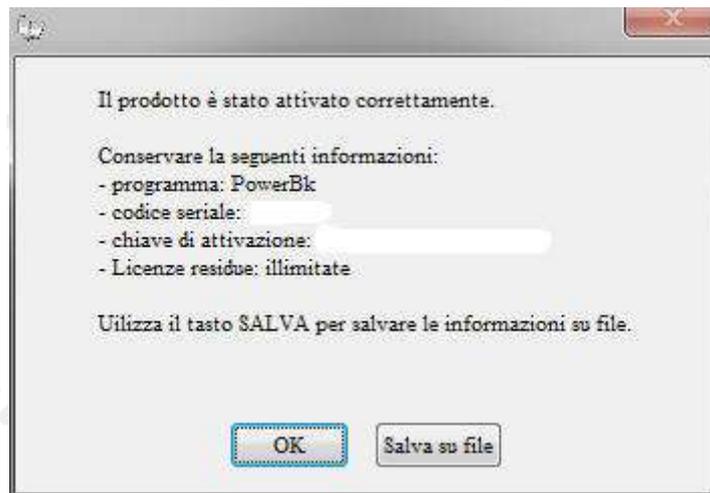

Maggiori informazioni sulla procedura di acquisto e attivazione possono essere lette dall'help online: [procedura di acquisto e attivazione del prodotto](#).

Maggiori informazioni sull'utilizzo della schermata di login possono essere lette dall'help online: [help di utilizzo della schermata di login](#).

## ESECUZIONE DEL SOFTWARE (torna all'indice)

Per eseguire il software è necessario cliccare sulla relativa icona nel desktop o sul menù **START** di Windows nel seguente percorso:

**START -> PROGRAMMI -> POWERWOLF -> POWERAFA – Gestione Afasia**



Dopo l'esecuzione, appare la **finestra di login**:



Inserire il **Nome Utente** e la **Password** e premere il pulsante **Conferma**.

**ALLA PRIMA INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA VENGONO CREATI DUE ACCOUNT. IL PRIMO, DI TIPO AMMINISTRATORE, CONSENTE IL PIENO CONTROLLO DELLE OPZIONI DEL PROGRAMMA E SI PUÒ ACCEDERE MEDIANTE I SEGUENTI PARAMETRI:**

**UTENTE: AMMINISTRATORE - PASSWORD: AMMINISTRATORE**

**IL SECONDO ACCOUNT è DI TIPO PAZIENTE, CON IL QUALE È POSSIBILE SVOLGERE GLI ESERCIZI E SI ACCEDE MEDIANTE I SEGUENTI PARAMETRI:**

**UTENTE: PAZIENTE - PASSWORD: PAZIENTE**

Il programma NON distingue tra lettere maiuscole e minuscole.

Si consiglia in ogni caso di creare un account personalizzato per il paziente, mediante l'apposito pulsante "**Account**" che consente di aggiungere un nuovo paziente nel database, come mostrato nella seguente schermata:

**Inserimento/Modifica Account...**

Username (\*)  (min. 4 caratteri)

Password (\*)  (min. 4 caratteri)

Cognome

Nome

Tipologia Account Liv.2  Bloccato?

Scadenza Password DD/MM/YYYY (F3: Reset)

Scadenza Account DD/MM/YYYY (F4: Reset)

Informazioni Aggiuntive

Abilita salvataggio dati di accesso su periferica


C:\Users\Antonio\Documents\Powerwolf\PowerAFA\database.mdb

DB Principale (\*) campi obbligatori

Salva (F1) Annulla (Esc)

Vai con il mouse su un controllo per ricevere informazioni a riguardo

Dopo aver inserito i dati di accesso appare la schermata principale del programma:

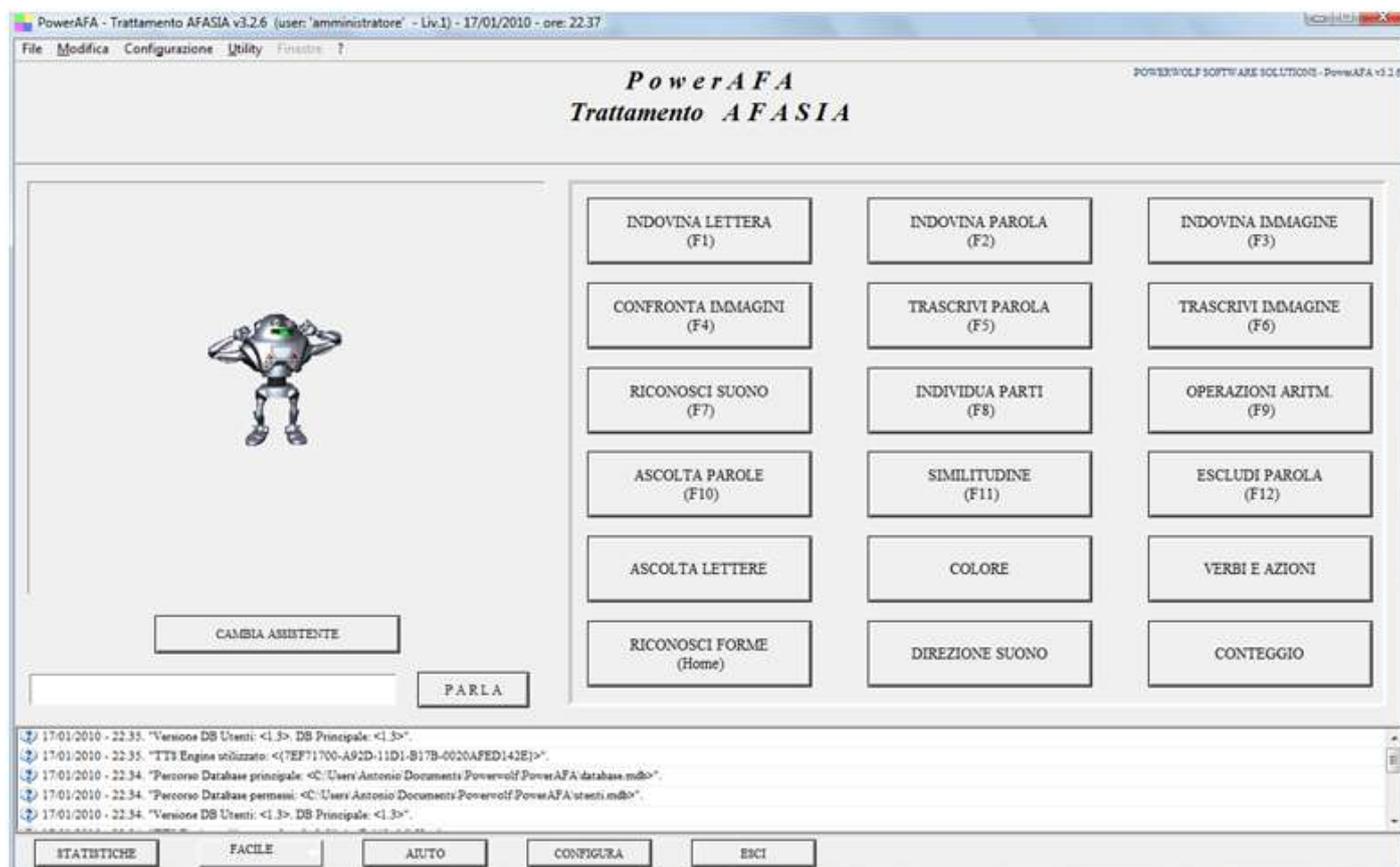

La schermata principale è composta da diverse sezioni:

- **Menù principale** (parte alta della schermata), che consente di eseguire la maggior parte delle funzioni del programma;

- Sezione **Block Notes** (parte sinistra della schermata), in cui è possibile scrivere informazioni (promemoria, numeri telefonici, ...) che vengono memorizzate nel database e conservate tra un'esecuzione e l'altra del programma;
- Sezione **Pulsanti Rapidi** (parte destra della schermata), in cui sono presenti alcuni pulsanti associati alle funzioni più comuni del programma e in particolare i pulsanti per iniziare gli esercizi e quelli relativi alla configurazione;
- Sezione **INFO** (parte bassa della schermata), in cui sono visualizzati alcuni suggerimenti utili sull'uso del programma e alcune informazioni a carattere generale;
- **ToolBar** (nella parte bassa della schermata), in cui sono presenti i pulsanti per la visualizzazione delle statistiche, la selezione del livello di difficoltà del paziente, la visualizzazione dell'aiuto, l'uscita dal programma e altre operazioni comuni.

Tasti comuni: screenshot, modifica font, segnalazione bug.

Sono riportati di seguito alcune combinazioni di tasti con la relativa funzione (le combinazioni non sono disponibili in tutte le schede):

- Il tasto **ESC** può essere adoperato per chiudere rapidamente la maggior parte delle finestre del programma.
- La combinazione **CTRL-F12** (scheda screenshot) consente di salvare su file o stampare il contenuto della finestra attiva;
- La combinazione **CTRL-PagUp** e **CTRL-PgDown** consentono di variare la dimensione del font;
- La combinazione **CTRL-F11** consente di aprire la scheda per la segnalazione dei bug/proposte di miglioramento, come spiegato nell'apposita sezione.

## ESECUZIONE DEGLI ESERCIZI (torna all'indice)

Prima di eseguire gli esercizi è possibile scegliere il proprio assistente adoperando il pulsante “**Cambia Assistente**” o con l'apposita voce nel menù di configurazione (“**Configura Paziente**”). E' consigliato inoltre selezionare il livello di difficoltà degli esercizi mediante il pulsante di selezione del livello nella parte bassa della schermata principale. Sono disponibili tre livelli di difficoltà. E' opportuno iniziare con il livello facile e aumentare gradualmente il livello di difficoltà quando l'esito degli esercizi è mediamente positivo e soddisfacente.

Per eseguire gli esercizi è sufficiente cliccare i corrispondenti pulsanti nella parte destra della schermata principale (pulsanti di selezione rapida). All'interno di ogni scheda con l'esercizio è riportato un tasto di AIUTO per richiedere spiegazioni sullo svolgimento.



Nella parte bassa sono riportate il numero di risposte esatte, le risposte sbagliate, il numero complessivo di domande e il tempo di svolgimento dell'esercizio. La maggioranza degli esercizi si svolge selezionando la risposta con l'utilizzo del mouse (o se si è provveduto all'acquisto di un monitor *touch-screen*, cliccando direttamente sul monitor con la propria mano o apposito supporto). Alcuni esercizi richiedono l'uso della tastiera per l'inserimento delle risposte. Per gli esercizi che richiedono la selezione di una risposta è possibile adoperare i tasti F1, F2, F3, ..., della tastiera.


Per terminare prematuramente una scheda è possibile adoperare il tasto ESC oppure il pulsante di USCITA.

Per il corretto svolgimento degli esercizi è indispensabile adoperare delle cuffie o casse per ascoltare le parole e i suggerimenti dell'assistente.

## STATISTICHE (torna all'indice)

Nella parte bassa della schermata principale, è presente un pulsante denominato “**Statistiche**”. Il pulsante consente di aprire la scheda delle statistiche con la quale è possibile visualizzare e monitorare i progressi del paziente e, in particolare, individuare gli esercizi nei quali il paziente presenta le maggiori difficoltà.

E' consigliato, qualora si cambi livello di difficoltà, resettare le statistiche, adoperando l'apposito pulsante “**Resetta**” nella scheda statistiche.

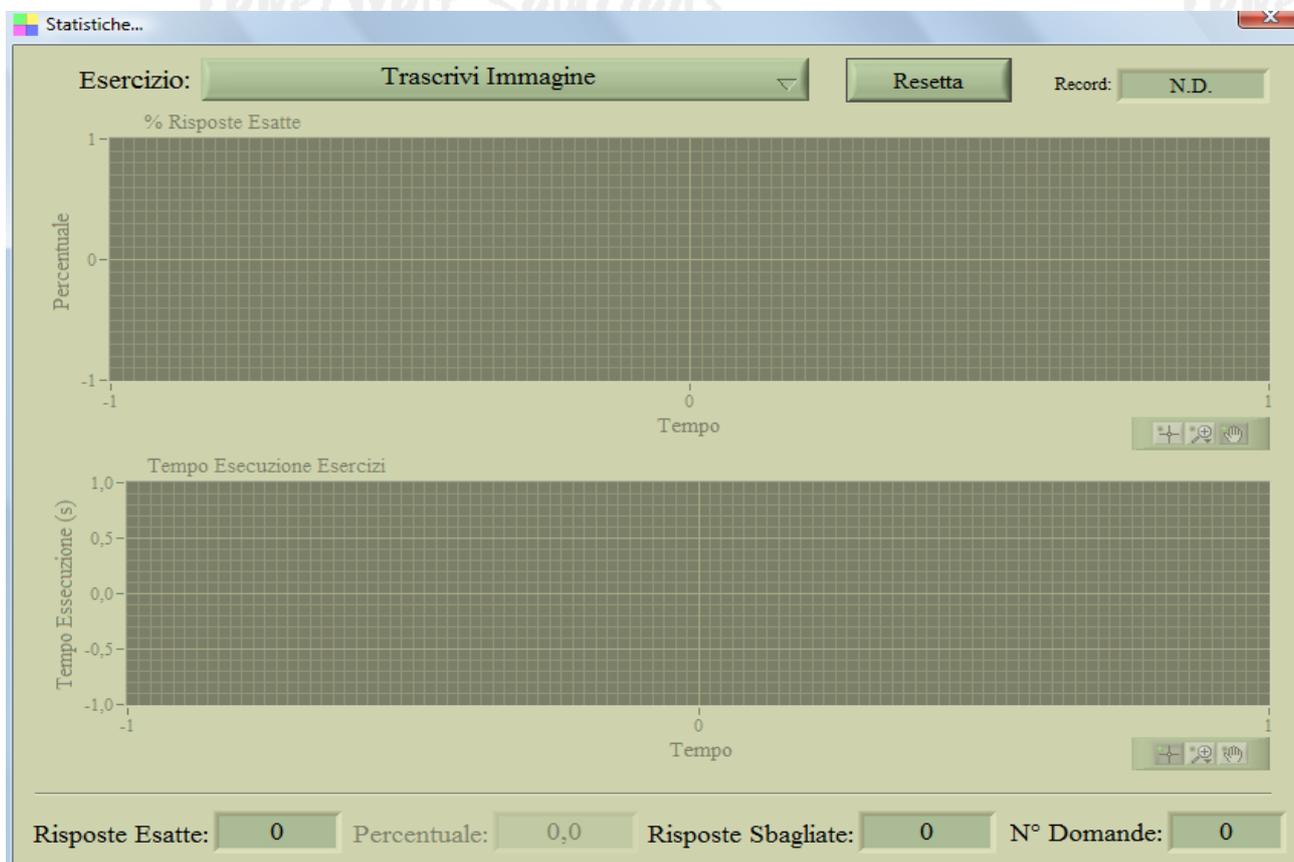

Per visualizzare le statistiche globali nella casella “**Esercizio**” selezionare “**Tutti gli Esercizi**”. Se si vuole monitorare un singolo esercizio, selezionare il nome dell'esercizio. Nella scheda sono riportati le percentuali di risposte esatte (grafico superiore) e il tempo di esecuzione degli esercizi (grafico inferiore). I grafici sono visualizzati in funzione del tempo e quindi procedendo da sinistra verso destra nella lettura di un grafico, si ritrovano i risultati degli esercizi svolti di recente, mentre percorrendo il grafico verso sinistra si “va indietro nel tempo”. Dunque, se un paziente ha avuto dei progressi, si noterà un aumento della percentuale degli esercizi svolti procedendo da sinistra a destra (grafico superiore) e una diminuzione del tempo di esecuzione degli esercizi (grafico inferiore).

## CONFIGURAZIONE e OPZIONI [\(torna all'indice\)](#)

Nel menù principale alle voci “**Configurazione**” e “**Modifica**” sono disponibili alcune voci per la regolazione del programma:

- **Gestione Utenti e Password.** Nel menù 'Modifica' sono presenti due voci: a) Modifica Password di Accesso; b) Inserisci nuovo Paziente. La prima voce consente di modificare la password di accesso per l'utente attuale. Si apre una schermata dove è necessario inserire la password attualmente in uso e la nuova password. La seconda voce consente di inserire un nuovo paziente, come mostrato di seguito:

Username (\*) (min. 4 caratteri)

Password (\*) (min. 4 caratteri)

Cognome

Nome

Tipologia Account Liv.2  Bloccato?

Scadenza Password DD/MM/YYYY (F3: Reset)

Scadenza Account DD/MM/YYYY (F4: Reset)

Informazioni Aggiuntive

Abilita salvataggio dati di accesso su periferica


C:\Users\Antonio\Documents\Powerwolf\PowerAFA\database.mdb

DB Principale (\*) campi obbligatori


Salva (F1) Annulla (Esc)

Vai con il mouse su un controllo per ricevere informazioni a riguardo

- **Settaggio dei colori della schermata principale.** Nel menù modifica è presente la voce “**Configurazione Aspetti Visivi**”, con la quale è possibile modificare i colori del programma, e in particolare l'aspetto della schermata principale:

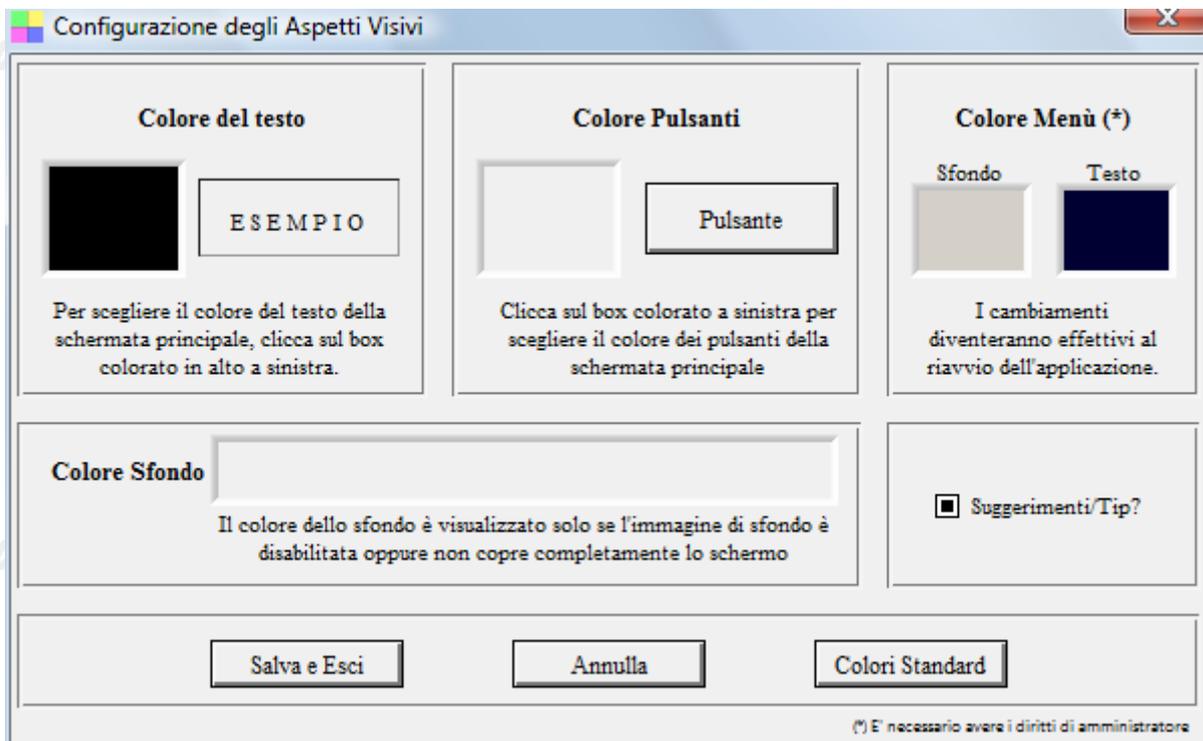

**d) Regolazione opzioni del paziente.** E' possibile regolare alcune opzioni relative al paziente, mediante la scheda "Opzioni Paziente" raggiungibile dal menù **Configurazione** → **parametri paziente**.

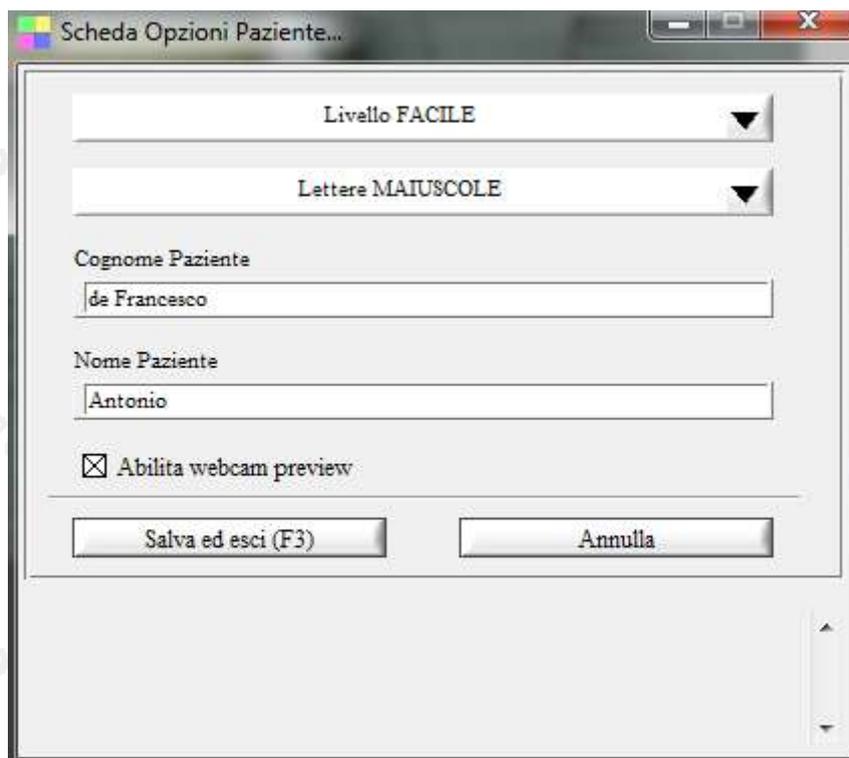

Nella scheda è possibile selezionare, per il paziente attuale, il livello di difficoltà, l'utilizzo delle lettere maiuscole o minuscole, ed è possibile inoltre modificare cognome e nome.

La funzione di cambio Maiuscola/Minuscola consente di visualizzare negli esercizi e nei suggerimenti dell'assistente animato parole con lettere maiuscole o minuscole e dare quindi la possibilità al paziente di esercitarsi sia con le lettere maiuscole che con le minuscole.


E' presente inoltre una casella di abilitazione della webcam (**abilita webcam preview**), che consente, nel caso si disponga di una sorgente video, di visualizzare un'immagine del paziente. Orientando la webcam sul proprio volto, il paziente può avere un feedback e controllare la corretta posizione dei muscoli facciali e della lingua per la corretta pronuncia dei fonemi.

**e) Regolazione dei parametri del suono.** E' possibile regolare i parametri relativi al suono nella scheda di "configurazione degli effetti sonori", presente nel **menù Configurazione**:



Nella scheda è possibile configurare il volume della musica, il file MIDI da riprodurre come musica di sottofondo ed è possibile inoltre abilitare o disabilitare la riproduzione degli effetti sonori. Si sconsiglia comunque di disabilitare gli effetti sonori, in quanto alcuni esercizi necessitano degli effetti sonori per la corretta esecuzione. Se nel campo File MIDI non si riporta alcun file, verrà riprodotta la musica di default installata con il programma.

**f) Configurazione parametri assistente animato.** E' possibile configurare le caratteristiche dell'assistente animato nella scheda di "Configurazione Assistente Animato":

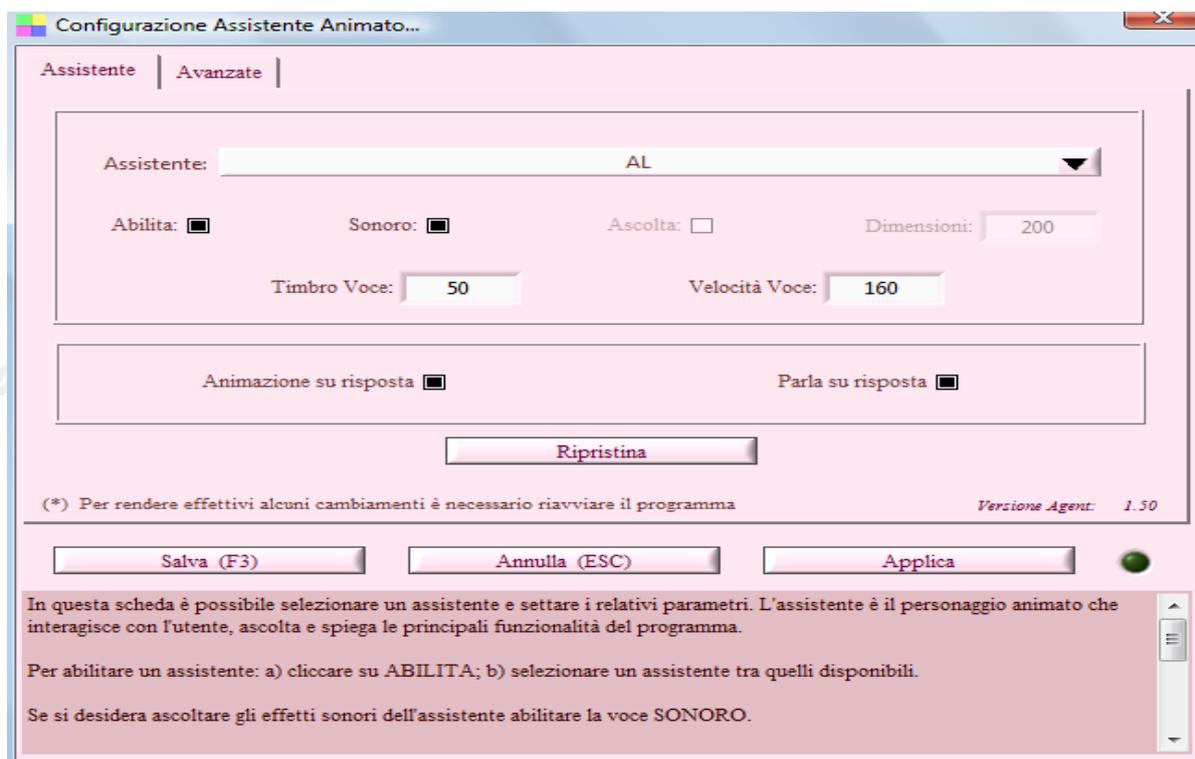

E' possibile aprire la scheda tramite **menù Configurazione** → **Configura Assistente Animato** oppure nei pulsanti di selezione rapida con il pulsante **“Assistente”** nel menù configurazione. Nella scheda è possibile selezionare l'assistente, abilitare e disabilitare l'assistente, gli effetti sonori dell'assistente, scegliere le dimensioni e le caratteristiche della voce. Maggiori informazioni nella scheda.


## ALTRE FUNZIONALITA' [\(torna all'indice\)](#)

**a) Minimizza nella Tray Icon.** Consente di minimizzare il programma nella Tray Icon, ossia nell'apposita zona a destra della Barra delle Applicazioni di Windows in cui si trovano le icone dei programmi in esecuzione. Quando si riduce ad icona il programma, non avviene nessuna perdita di informazione, né chiusura del programma. Il programma resta invece in memoria con tutti i dati. Per ripristinare il programma e visualizzare nuovamente la schermata principale, è sufficiente un click sulla corrispondente icona, che viene automaticamente creata nella Tray Icon. Tale funzione è utile quando si desidera mantenere in esecuzione il programma per molto tempo, senza occupare la barra delle applicazioni con il nome della finestra o il desktop;

**b) Disconnetti - Cambia Utente.** Questa voce del menù ha la duplice funzione di riavviare il programma ed eventualmente cambiare utente / paziente;

**c) Menù 'Finestre'.** Nel menù finestre sono riportate tutte le finestre del programma attualmente aperte. Per richiamare e visualizzare in primo piano una finestra già aperta, è sufficiente un click sulla corrispondente voce.


**d) Regolazione guidata delle impostazioni.** Assiste l'utente nella configurazione dei principali parametri del programma.

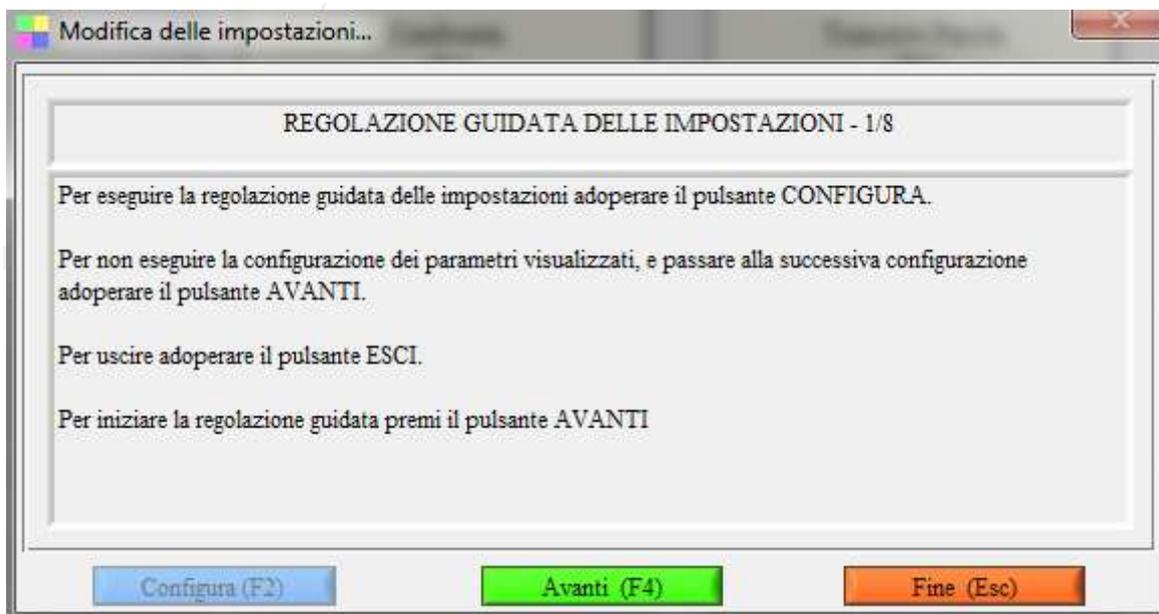

**e) Menù "?".** Nel menù principale, selezionando la voce "?" è possibile eseguire alcune funzionalità supplementari del programma. E' possibile visualizzare le informazioni dettagliate relative al programma (nome, versione, data, ...), le informazioni sul proprio computer, aprire la scheda di diagnosi per i malfunzionamenti, è possibile visualizzare le novità introdotte nell'ultimo aggiornamento e gli errori che sono stati risolti. E' possibile, inoltre, aprire la pagina web di supporto del prodotto ed eseguire la procedura di aggiornamento automatico dell'applicativo.


## AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA (torna all'indice)

Il programma è in continuo aggiornamento al fine di risolvere errori, inserire nuovi esercizi e funzionalità. Gli aggiornamenti sono gratuiti e pertanto si consiglia di aggiornare il programma di frequente. Per effettuare automaticamente la ricerca di aggiornamenti è necessario che gli aggiornamenti automatici siano attivati. Per configurare gli aggiornamenti è disponibile la voce “**Configura Aggiornamento Automatico**” nel menù **Configurazione**:

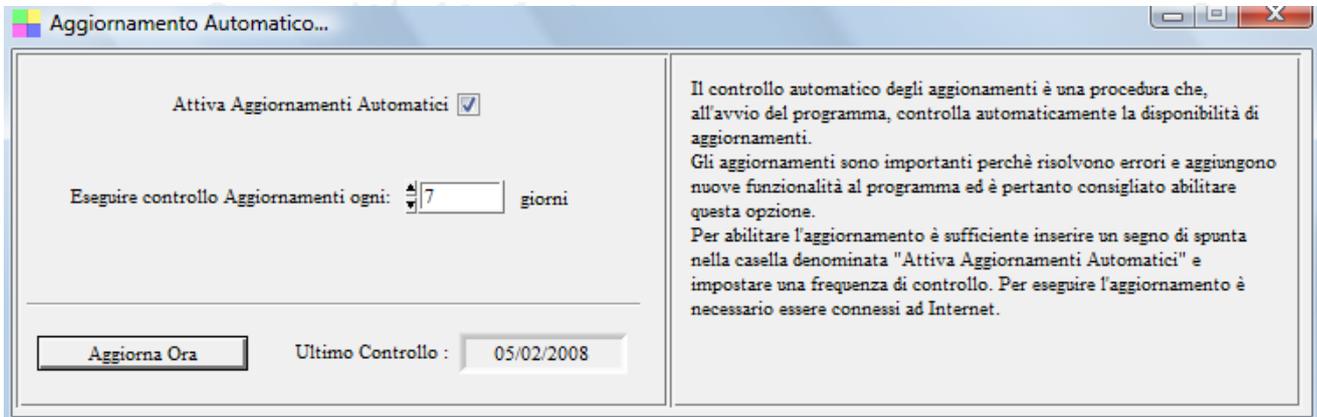

Nella scheda è possibile decidere se attivare o meno la ricerca automatica di aggiornamenti e la frequenza con cui controllare gli aggiornamenti.

Per eseguire manualmente un aggiornamento cliccare sulla voce “**Controllo Aggiornamenti del Prodotto**” nel menù “?”:

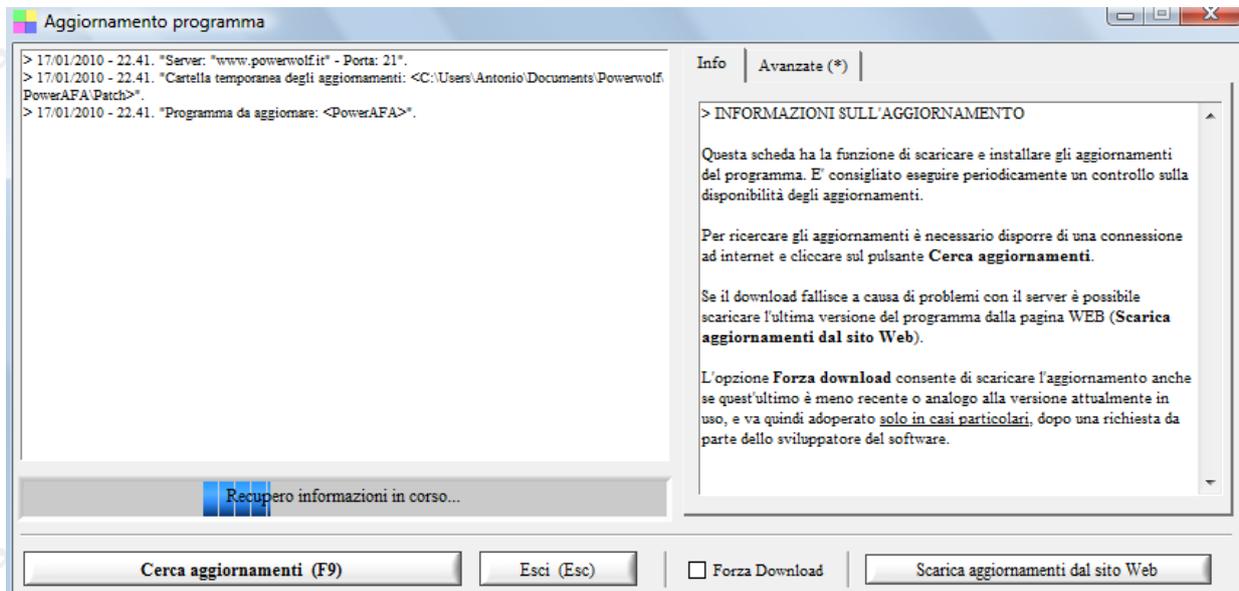

## INSERIMENTO DI UN NUOVO PAZIENTE (torna all'indice)

Il programma consente di inserire diversi account, uno per paziente. In questo modo è possibile gestire differenti pazienti, ognuno con i propri settaggi e le proprie statistiche. Ogni paziente ha la propria username e la password di accesso che lo identifica univocamente. Al momento dell'installazione del programma viene creato l'account con username: **PAZIENTE** e password: **PAZIENTE**. Per creare un nuovo account paziente adoperare il pulsante di selezione rapida “**Configurazione**” e selezionare “**Nuovo Paziente**” (in alternativa è presente anche una voce nel menù “**Modifica**”).

Username (\*) (min. 4 caratteri)

Password (\*) (min. 4 caratteri)

Cognome

Nome

Tipologia Account Liv.2  Bloccato?

Scadenza Password DD/MM/YYYY (F3: Reset)

Scadenza Account DD/MM/YYYY (F4: Reset)

Informazioni Aggiuntive

Abilita salvataggio dati di accesso su periferica

C:\Users\Antonio\Documents\Powerwolf\PowerAFA\database.mdb

DB Principale (\*) campi obbligatori

Salva (F1) Annulla (Esc)


Vai con il mouse su un controllo per ricevere informazioni a riguardo

Per creare un nuovo account è sufficiente inserire i campi username e password (obbligatori) e se si desidera, il nome e cognome del paziente. Gli altri parametri non sono necessari e si consiglia di non modificarli. Terminato l'inserimento, nella schermata iniziale di login è possibile accedere all'account del paziente inserito, digitando la rispettiva username e password.


## PERSONALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI (torna all'indice)

Il programma consente di personalizzare gli esercizi. E' possibile scegliere il numero di domande, la difficoltà e alcuni parametri per adeguare gli esercizi alle esigenze del paziente. Con alcuni esercizi è possibile anche inserire e personalizzare le immagini visualizzate, i suoni e le parole adoperate.

Con la voce 'Configurazione' del menù principale, alla voce 'Personalizza Esercizi', è possibile aprire la scheda per la personalizzazione degli esercizi, come mostrato nella seguente schermata:

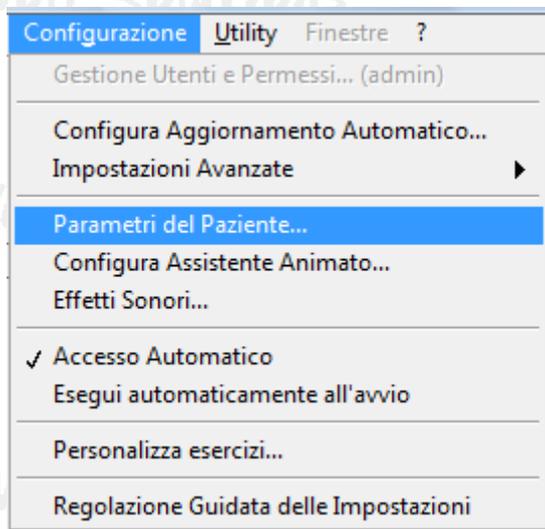

Si apre la seguente schermata:

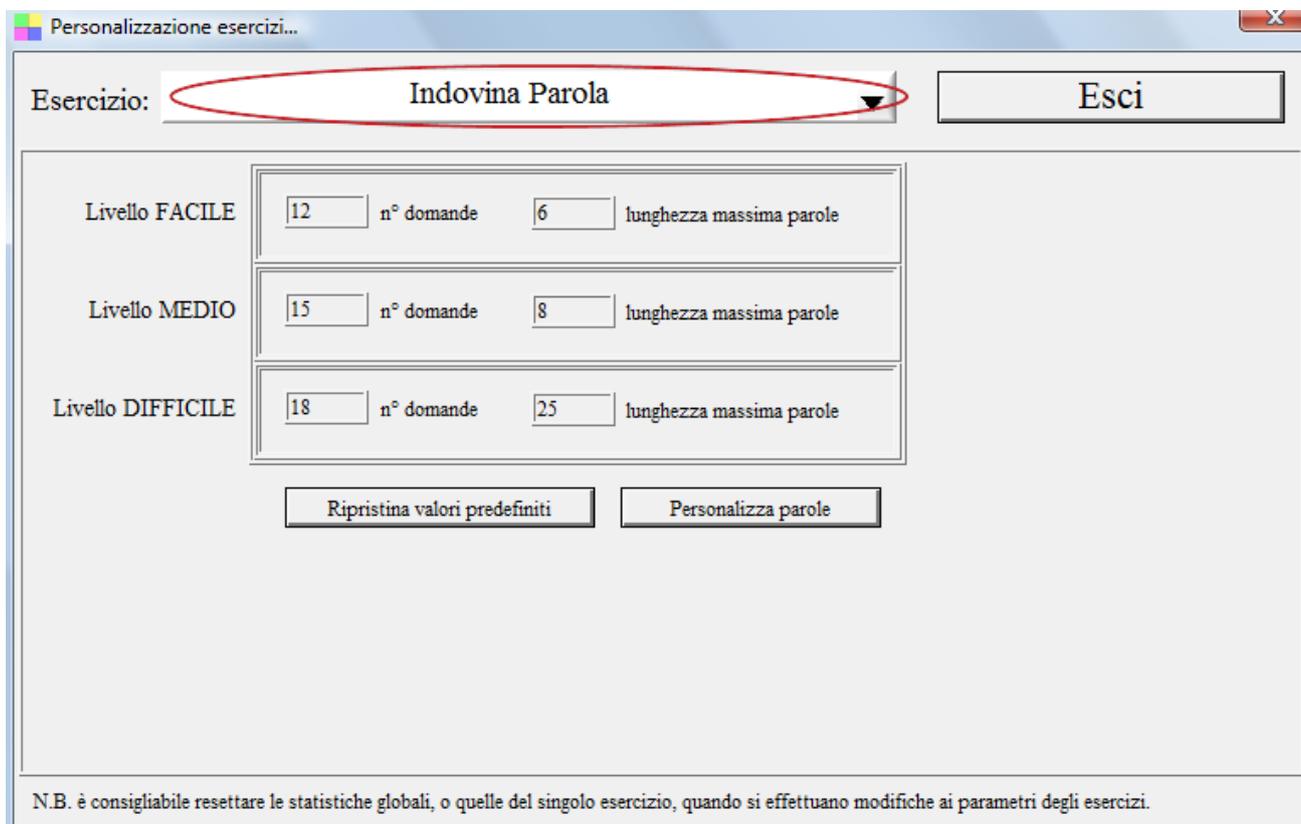A screenshot of a dialog box titled 'Personalizzazione esercizi...'. At the top, there is a dropdown menu for 'Esercizio:' with 'Indovina Parola' selected and circled in red. To the right of the dropdown is an 'Esci' button. Below the dropdown, there are three rows for different difficulty levels: 'Livello FACILE', 'Livello MEDIO', and 'Livello DIFFICILE'. Each row has two input fields: 'n° domande' and 'lunghezza massima parole'. For 'FACILE', the values are 12 and 6. For 'MEDIO', the values are 15 and 8. For 'DIFFICILE', the values are 18 and 25. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Ripristina valori predefiniti' and 'Personalizza parole'. At the very bottom, there is a note: 'N.B. è consigliabile resettare le statistiche globali, o quelle del singolo esercizio, quando si effettuano modifiche ai parametri degli esercizi.'

Come evidenziato nella precedente scheda è necessario, innanzitutto, selezionare l'esercizio da personalizzare. Dopo la selezione è possibile selezionare i principali parametri dell'esercizio, per ognuno dei livelli del paziente. E' possibile ad esempio personalizzare il numero di domande e altre proprietà specifiche

del singolo esercizio. Maggiori informazioni sulle proprietà sono riportate nelle schede. Dopo aver apportato delle modifiche è possibile ripristinare i valori predefiniti utilizzando il pulsante ‘**Ripristina valori predefiniti**’ (il pulsante ripristina i valori di fabbrica solo per l’esercizio selezionato).

Con alcuni esercizi riguardanti l’uso delle parole, è presente un pulsante aggiuntivo che consente di inserire e modificare le parole da adoperare, come mostrato di seguito:




Personalizzazione esercizi...

Esercizio: **Indovina Parola** Esci

Livello FACILE	<input type="text" value="12"/> n° domande	<input type="text" value="6"/> lunghezza massima parole
Livello MEDIO	<input type="text" value="15"/> n° domande	<input type="text" value="8"/> lunghezza massima parole
Livello DIFFICILE	<input type="text" value="18"/> n° domande	<input type="text" value="25"/> lunghezza massima parole

N.B. è consigliabile resettare le statistiche globali, o quelle del singolo esercizio, quando si effettuano modifiche ai parametri degli esercizi.


Si apre la seguente scheda nella quale è possibile inserire, rimuovere o modificare le singole parole da adoperare nell’esercizio:

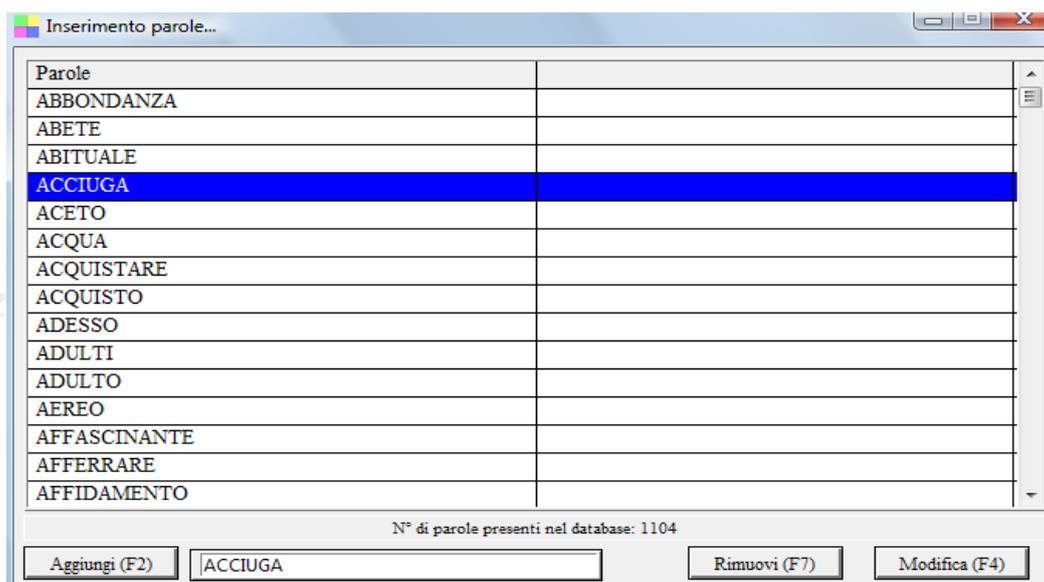


Parole
ABBONDANZA
ABETE
ABITUALE
<b>ACCIUGA</b>
ACETO
ACQUA
ACQUISTARE
ACQUISTO
ADESSO
ADULTI
ADULTO
AEREO
AFFASCINANTE
AFFERRARE
AFFIDAMENTO

N° di parole presenti nel database: 1104

Con alcuni esercizi riguardanti l’uso delle immagini è presente un pulsante aggiuntivo che consente di personalizzare le immagini da adoperare, come mostrato di seguito:

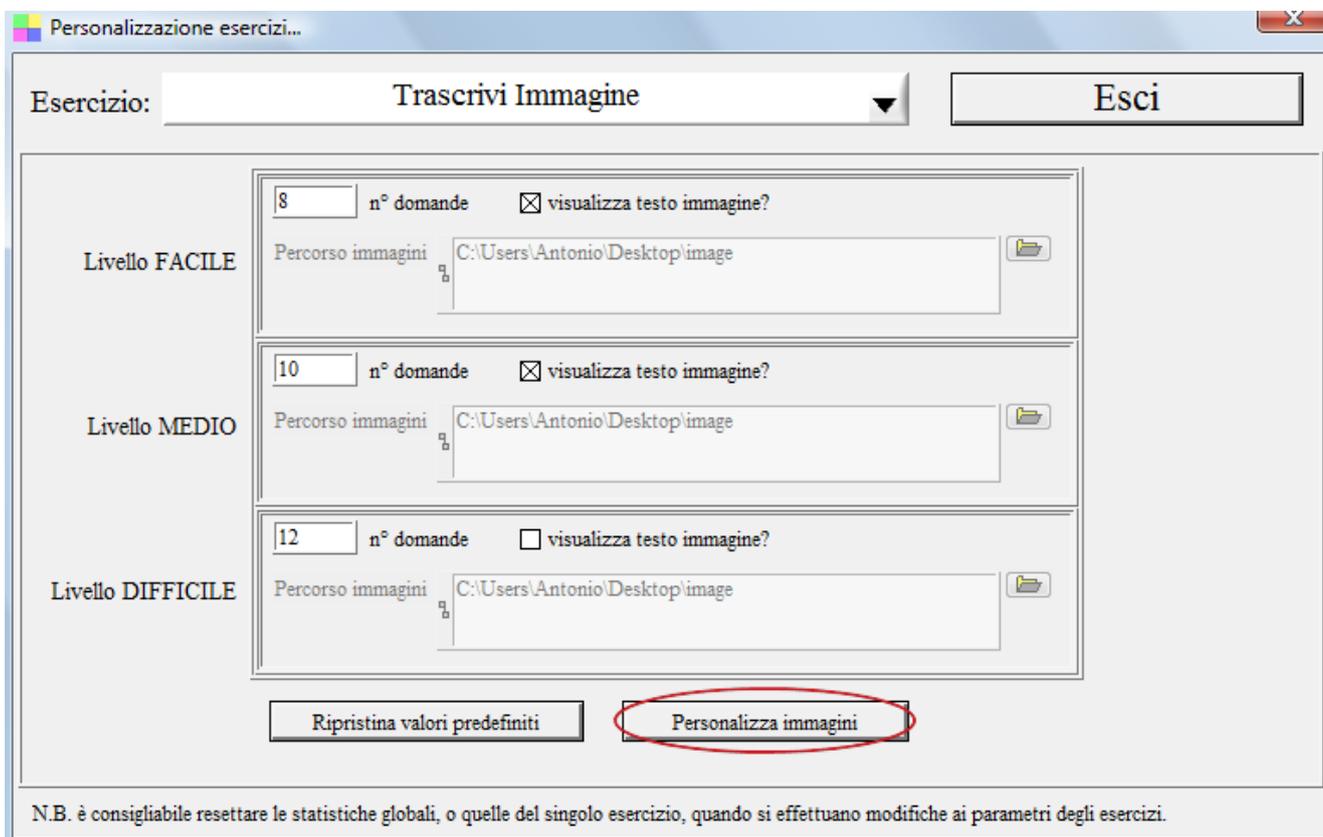

Adoperando il pulsante **‘Personalizza immagini’**, si apre la seguente scheda in cui è possibile personalizzare le immagini da adoperare nell’esercizio:

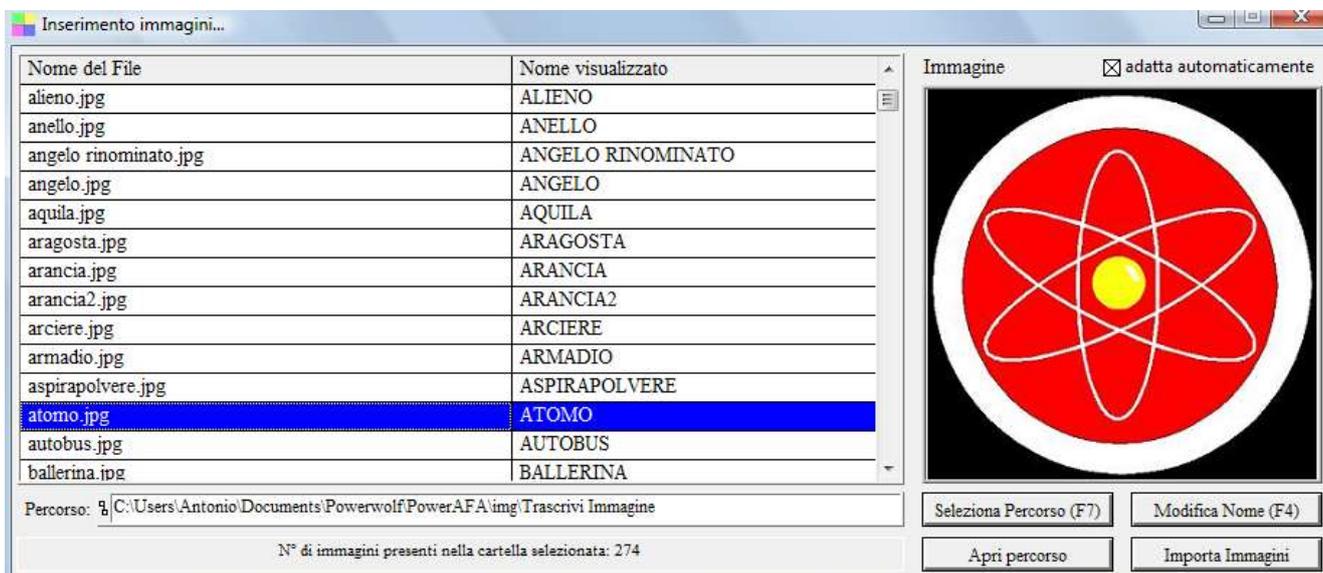

Il funzionamento della scheda è spiegato al suo interno. In particolare, il pulsante **‘Seleziona Percorso’** consente di selezionare un differente percorso da adoperare per le immagini. Il programma adoperare tutte le immagini JPEG trovate all’interno del percorso selezionato. La modifica del nome visualizzato, l’aggiunta o la rimozione influenza quindi direttamente il contenuto della cartella. In particolare, la rimozione di un’immagine comporta la rimozione fisica del file corrispondente dal disco.

Cliccando sulle voci della tabella è possibile visualizzare un’anteprima delle immagini e con il tasto destro del mouse è possibile visualizzare un menù dal quale eseguire alcune importanti operazioni, quali la rimozione di un file o la modifica del nome visualizzato.

La tabella riporta il nome del file, così come salvato su disco, e il **‘nome visualizzato’** che è il nome adoperato all’interno degli esercizi.

---

PowerWolf Solutions

PowerWolf

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutio

## SEGNALAZIONE BUG, PROPOSTE e SUGGERIMENTI ([torna all'indice](#))

Il programma è predisposto con alcune funzionalità per la segnalazione di malfunzionamenti o proposte di miglioramento. Nel menù orizzontale della schermata principale è disponibile la funzione di segnalazione degli errori tramite un server MANTIS. In alternativa, nella maggior parte delle schede, mediante la pressione dei tasti CTRL+F11 è possibile aprire la scheda di segnalazione, come mostrato in seguito:

Segnalazione errore / miglioramento [CTRL-F11]

Anteprima

# Powerwolf Software Solutions

info@powerwolf.it

Nome programma: PowerDREAM

Versione: v2.0.4

Autore: Powerwolf Software Solutions

Data Scadenza: Nessuna

Web: www.powerwolf.it

Line Style: 1, Width: 1, Style: Solid, Color: [Black]

Descrizione: <inserisci le informazioni dettagliate sull'errore o sulla proposta di miglioramento>

Invia segnalazione

Nella schermata è possibile aggiungere commenti testuali e grafici alla scheda di cui si vuole segnalare un malfunzionamento, una nuova funzionalità o un semplice suggerimento. Mediante il pulsante di invio segnalazione, viene inviata una richiesta direttamente al server dello sviluppatore.


## CUSTOMIZZAZIONE DEI MENU' (torna all'indice)

I menù della schermata principale del software possono essere personalizzati per riorganizzare le informazioni, eliminare le voci che non vengono adoperate e così via.

A tale scopo è disponibile la scheda di personalizzazione dei menù:

➔ CONFIGURAZIONE > CUSTOMIZZAZIONE MENU'

La scheda che si apre è la seguente:

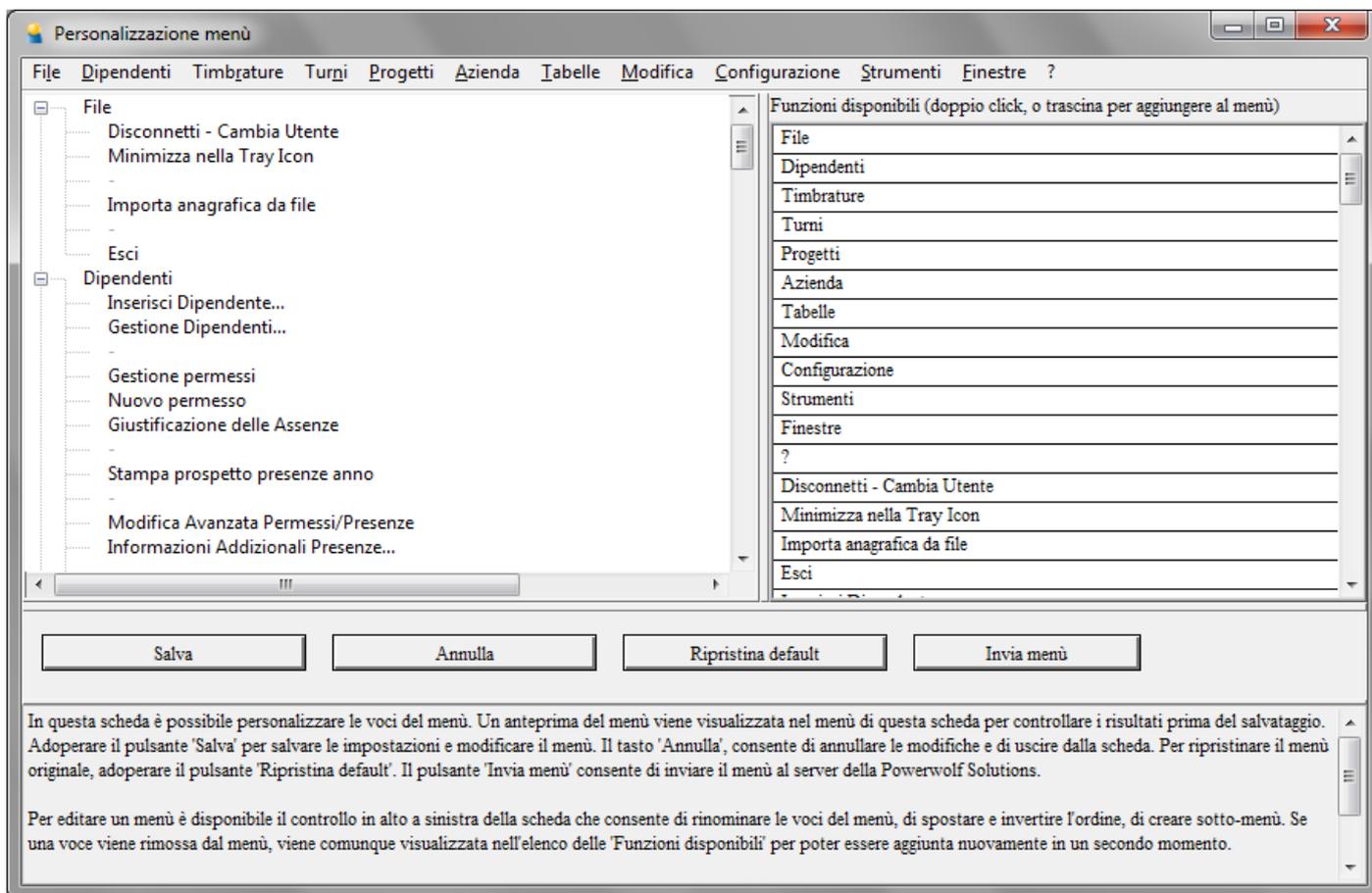

Nella parte superiore della scheda viene riportata l'anteprima del menù per poter controllare il risultato prima di salvare. Nell'albero delle voci (parte sinistra della scheda) è possibile spostare e riorganizzare le voci. Per spostare una voce è sufficiente adoperare il mouse in modalità Drag & Drop. Selezionando invece una voce dell'albero e adoperando il tasto destro del mouse, appare un context-menù con il quale è possibile aggiungere nuove voci, eliminare e disabilitare quelle esistenti. In ogni caso le voci eliminate possono essere aggiunte nuovamente adoperando la lista delle funzioni disponibili (parte destra della scheda). Per aggiungere una voce è sufficiente selezionare nell'albero delle voci il punto esatto e poi eseguire un doppio click del mouse sulla voce dell'elenco delle funzioni disponibili (parte destra della scheda).

Nel caso di errori o quando necessario, è possibile ripristinare il menù originale adoperando il pulsante *Ripristina Default*. Il pulsante *Salva* consente di salvare le modifiche e applicarle al menù della schermata principale. Il pulsante *Annulla*, annulla invece tutte le modifiche e consente di uscire dalla scheda.

[torna all'indice](#)